

ピッキング

処方入力を RP ごとに表示します。ロケーション登録されている場合はそちらを優先して表示します。

薬品コードの読み取りは、“クレードル”、“スキャン（注：現在ご使用になれません）”、“GS1 コード入力”の3種類から選択できます。薬品を間違えてピッキングした場合は、“警告表示”と“警告音”でお知らせします。自動分包機の薬品を登録しておく、自動でピッキング済みの表示になります（**レセコンで“一包化”を入力する必要があります**）。

クレードルからピッキングする


1

2

3

4



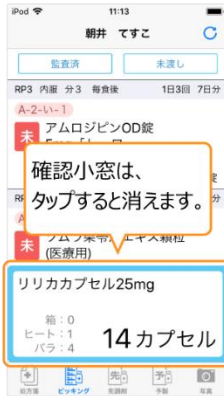


処方箋画面から患者を選択します。

クレードルの左右どちらかのボタンを押し、薬品コードを読み取ります。

ピッキングした薬品の確認小窓が表示されます。ピッキングを繰り返します。

最後の薬品をピッキングすると、自動で“監査済”となり、ピッキングを完了します。

画面説明

1


2

3

4

5

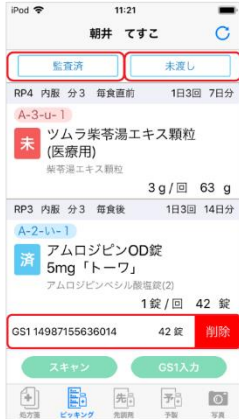


★1 棚番表示 … 薬品の棚番が表示されます。（※P5 棚番の登録参照）

★2 調剤状況アイコン表示 … 【未】ピッキング・調剤が未のもの 【済】ピッキング・調剤済んだもの 【誤】薬品間違い
【差】法定量以内の誤差 【量】法定量以上の誤差

1. クレードル 薬品コードを捉えた状態で、左右のボタンのどちらかを押しと薬品コードを読み取ります。
2. スキャン 現在ご使用になれません。
3. GS1 入力 GS1 コード、または薬品名を手入力して検索します。薬品に GS1 コードがない場合や読み取れない場合に使用します。
4. 監査済 監査が済んだ時点でタップし、ピッキングを完了します。
5. 未渡し 監査済みであるが未渡しの時には、“監査済み”と“未渡し”の両方にチェックを入れて情報を共有します。
6. 削除 左にスワイプすると削除することができます。削除すると、ピッキング【未】の状態に戻ります。